

bella
my
bella

HOW TO SANITISE IN MICROWAVE

Insert the cup in the case.

1




Fill the case
with water to half.
Don't cover.

2



Heat the cup in the microwave
at 850 watts for 5 minutes.
Take off the case. Be careful
the case can be very hot.

3

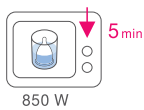

HOW TO WASH

Insert the cup in the case.

1




Fill the case with hot or cold
water. Close the case's lid
and shake for a few seconds.

2



Open the case,
pour out the water
and remove the cup.

3

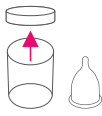

menstrual set

DAY
& NIGHT


S



menstrual
cup
+
cleaner case

Choose the right size:

	S	M	L
Recommended for women	under 20 and first-time users	20-30	over 30
	Ø 42 mm H 58 mm 25 ml	Ø 42 mm H 64 mm 29 ml	Ø 46 mm H 68 mm 40 ml

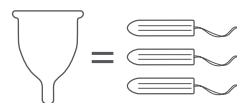

made of
medical
silicone

Cleaner case
is perfect for:

STORAGE
SANITISATION
WASHING



en Menstrual cup and case for storage and cleaning; de Menstruationstasse
und Behälter zur Aufbewahrung und Reinigung; hu Menstruációs kehely és
a tárolást és tisztítást szolgáló tárolódoboz; ro Cupă menstruală și cutie
pentru depozitare și curățare; bg Менструална чашка и кутия за
съхранение и почистване; it Menstruacine taurele ir dèzute laikymui bei
priežiurai; lv Menstruālā pilnve ar kastīti uzglabāšanai un mazgāšanai
et Menstrualanum koos karbiga hoiustamiseks ja puhastamiseks; cs
Menstruační kalíšek a krabička pro skladování a čištění; sk Menstruačný
kalíšok a nádobka na skladovanie a čistenie; uk Менструальна чаша
та бейла та контейнер для зберігання та чистіння; pl Kubeczek
menstruacyjny i pojemnik do przechowywania i czyszczenia

Manufacturer
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26,
87-100 Toruń, Polska/Poland bella@tzm-global.com
DE TZMO Deutschland GmbH, Waldstraße 2, 16359 Biesenthal AT TZMO Austria
GmbH, Vienna Twin Tower, Wienerbergstraße 11/12a, 1100 Wien HU Forgalmazza:
TZMO Hungary Kft. 3394 Egerszalok, Kúcsó sor u.2 RO TZMO Romania S.R.L.,
Sos. de centură nr. 3E, Com. Clinceni, jud. Ilfov, cod 077060 MD Deamarim SRL, str.
Petricani 21/3, Chisinau, Moldova BG Обслужване на клиентите
info.bg@tzm-global.com SK TZMO Slovakia s.r.o., Distriktná 29, 903 01
Senec CZ Distributor: TZMO Czech Republic s.r.o., Okružní 1174, 250 81 Nehvizdy
LT UAB TZMO Lietuva info.lt@tzm-global.com LV SIA TZMO Latvia
info.lv@tzm-global.com EE info.ee@tzm-global.com UA Бєрпоблє: AT
"Торунське Заклади Матєріалну Опатрункових С.А.", вул. Жукєвського, 20/26
87-100 Торунь, Польща, тел. +48 56 6123900, Служба споживачів: ТОВ
"Бєйла-Трєйд", вул. Ім. Адамє Мукєвського, буд. 16 А, м. Бєрєзанє, Київська обл.,
07543, тел. 044 5850597.

Kubeczek menstruacyjny wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych / Menstrual
cup made in USA

Information for the Indian market: Bella Menstrual Cup, Size: S, Net qty: 1 Piece,
Store away from moisture, direct heat and sunlight. Date of Manufacture, Expiry
date, MRP Rs. (incl. of all taxes): see on the side. Country of origin: USA. Imported
and Marketed by: BellaPremier Happy HygieneCare Pvt. Ltd., No. 19/1 Madurai-
Dindigul Highway, Ambathurai, Dindigul District, Tamil Nadu - 624 302, India.
For feedback, contact our customer care executive at the importer's address.
Ph: 080 267 426 44, Email ID: customercare.in@tzm-global.com, Website:
www.tzm.in, WhatsApp: +91 728 900 13 21.



READ MORE



tzm-global.com
bella-global.com



PRODUCT AND PACKAGING
DESIGNED IN ACCORDANCE
WITH THE PRINCIPLES OF
ECO-DESIGN, LIMITING
THE NEGATIVE IMPACT
ON THE ENVIRONMENT.
MORE AT:
tzm-global.com
/sustainable-development



Read the leaflet
before use