



pH-neutral

## Dismoclean<sup>®</sup> 24 Vario


Enzymatischer Reiniger für die maschinelle Aufbereitung  
im Vario-Verfahren.



Mit umfassenden Wirksamkeitsnachweisen und einer wissenschaftsbasierten Forschung und Entwicklung gewährleisten wir bei unseren Produkten zur Hygiene und Desinfektion einen bestmöglichen Qualitätsstandard.  
**Wir forschen für den Infektionsschutz. [www.bode-science-center.de](http://www.bode-science-center.de)**



# Dismoclean® 24 Vario

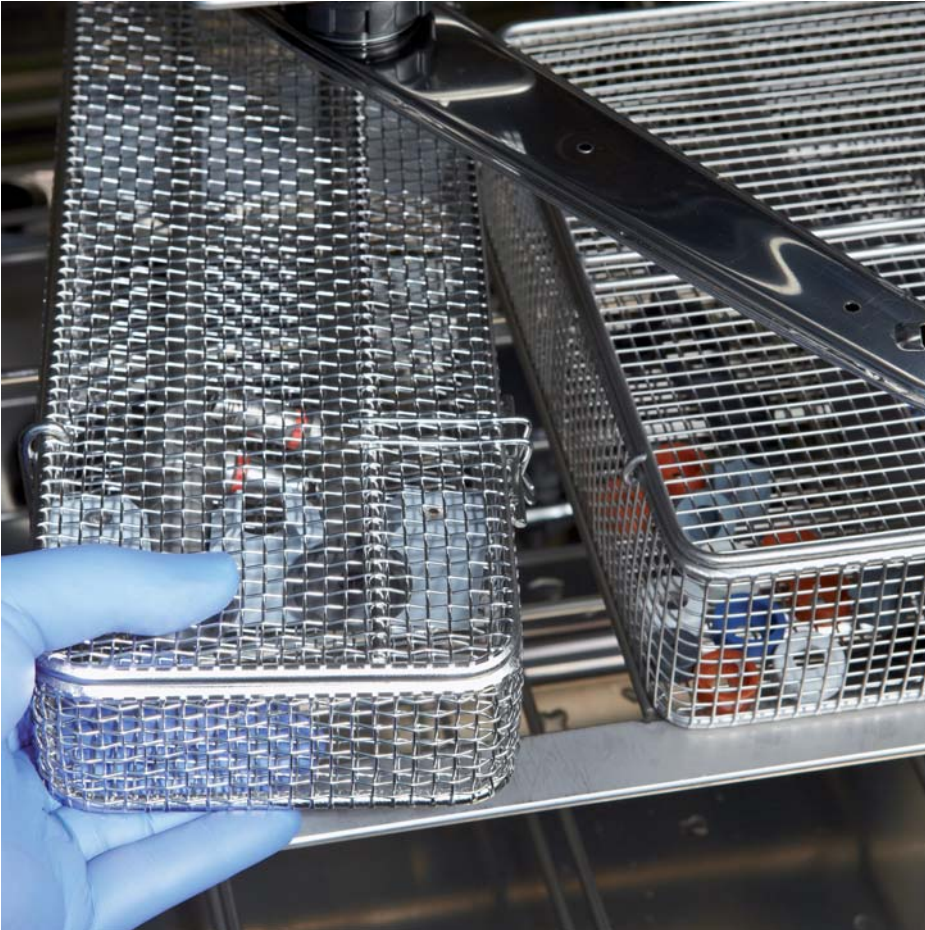

## Eigenschaften

Dismoclean® 24 Vario zeichnet sich aus durch

- pH-neutrale Einstellung
- hervorragende Reinigungsleistung
- umfassende Materialverträglichkeit
- Einformulierung von Enzymen

## Zusammensetzung

Tenside, mikroverkapselte Enzyme, Korrosionsinhibitoren, Komplexbildner, Lösemittel, Dispergiermittel.

## Anwendung

### 1. Maschinell

Dismoclean® 24 Vario besteht aus reinigungsaktiven Tensiden, die in ihrer Wirkung durch speziell einformulierte Enzyme unterstützt werden.

Der neutrale pH-Wert und die Korrosionsinhibitoren sind für die hohe Materialverträglichkeit verantwortlich. Somit können neben den MIC- auch chirurgische Instrumente, Intensiv- und Anästhesie-Materialien aufbereitet werden. Selbst eloxierte und farbeloxierte Container sowie Instrumente aus Buntmetallen behalten ihre Farbintensität. Je nach Wasserqualität kann auf eine Neutralisation verzichtet werden.

Folgender Programmablauf hat sich bewährt:

#### 1. Phase

Vorreinigung mit Kaltwasser ohne Produktzugabe (um grobe Verschmutzungen zu lösen und zu reinigen). 1 bis 3 Minuten.

#### 2. Phase

Kaltwassereinlauf, aufheizen und zudosieren von Dismoclean® 24 Vario. Diese Reinigungsflotte wird auf 45–55 °C temperiert. Die Kontaktzeit sollte 5 Minuten betragen.

Alternativ:

2. Phase: Duo-Vario-Programm (bewirkt noch bessere Reinigung):

1. Kaltwassereinlauf (oder VE-Wasser), aufheizen auf 50 °C und Dismoclean® 24 Vario zudosieren, 3 Minuten reinigen.

2. Abpumpen der Reinigungsflotte

3. erneuter Kaltwassereinlauf (oder VE-Wasser), aufheizen auf 55 °C und Dismoclean® 24 Vario zudosieren, 5 Minuten reinigen.

#### 3. Phase

Zwischenspülung (zur Entfernung von Produktresten).

#### 4. Phase

Desinfektion

VE-Wasser 90 °C – 5 Min.

alternativ  $A_0 = 3000$

#### 5. Phase

Trocknung.

## Dosierung

#### Maschinell:

3 – 7 ml/l je nach Wasserqualität

## 2. Manuelle Instrumentenreinigung

Dismoclean® 24 Vario kann auch für die manuelle Instrumentenreinigung in allen Wannensystemen inkl. Ultraschallbad in den Einsatz gelangen.

## Dosierung

#### Manuell:

5 – 10 ml/l je nach Verschmutzungsgrad

## Listung

CE-Kennzeichnung gemäß Medizinproduktegesetz (MPG bzw. MDD).

## Chemisch-physikalische Daten

Aussehen	hellgelb
pH-Wert Konzentrat	5 - 6
pH-Wert 0,5 %ige Lösung	ca. 6
Dichte (20 °C)	ca. 1,08 g/cm <sup>3</sup>





HARTMANN

hilft heilen.

PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Str. 12  
89522 Heidenheim  
Postfach 1420  
89504 Heidenheim  
Telefon +49 7321 36-0  
Fax +49 7321 36-3636

info@hartmann.info  
www.hartmann.de

**Kenzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG:**

**Xi** Reizend. Reizt die Augen und die Haut. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes sind daher zusätzliche Schutzmaßnahmen entsprechend § 9 GefStoffV erforderlich. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

**Hinweis:** Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



### Packungen

	Packungs- inhalt	Artikel Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>Dismoclean® 24 Vario</b>				
Kanister	5 l	972139	7508322	1 Stück
Kanister	10 l	972133	0946444	1 Stück
Kanister	25 l	972137	8655290	1 Stück

Die Sicherheit von Personal und Patient steht im Mittelpunkt unseres wissenschaftlichen Engagements. Umfassende Wirksamkeitsnachweise, die Auseinandersetzung mit Infektionsrisiken und die Entwicklung von Qualitätsprodukten und gezielten Präventionsmethoden leisten dazu einen wichtigen Beitrag.  
**Wir forschen für den Infektionsschutz. [www.bode-science-center.de](http://www.bode-science-center.de)**



**BODE SCIENCE CENTER** • Melanchthonstr. 27 • 22525 Hamburg • Tel. +49 40 54006-111 • Fax -777  
[www.bode-science-center.de](http://www.bode-science-center.de) • [contact@bode-science-center.com](mailto:contact@bode-science-center.com)