

# Sterilisator 75

Heißluft-Sterilisator.

Mit innovativem Ventilator-System



## Mehr Sicherheit

Kleine Heißluft-Sterilisatoren werden auch heute immer noch als Billiggeräte ohne mechanische Luftbewegung angeboten. Der Wärmeausgleich in diesen Geräten erfolgt meist mangelhaft und ohne Ventilator, wodurch die Gefahr von "Kaltluft"-Bereichen besteht, die den Sterilisationserfolg gefährden. Der MELAG *Sterilisator 75* dagegen garantiert eine sichere Sterilisation, denn er besitzt eine mechanische Luftbewegung. Ein Ventilator sorgt für perfekten Wärmeausgleich. Damit entspricht er der Forderung aller maßgeblichen Hygieniker!

## Mehr Komfort

Fast alle am Markt angebotenen Sterilisatoren dieser Größenordnung besitzen lediglich einen einfachen Korb für die Aufnahme der Instrumente. In diesem liegen sie ungeordnet und unübersichtlich, es besteht die Gefahr von Beschädigungen und von kleinen Verletzungen beim Herausnehmen. Um das zu vermeiden, bietet der *Sterilisator 75* Platz für bis zu zwei Tablett, auf denen das Instrumentarium übersichtlich und schonend ausgebreitet werden kann.

## Mehr Zeitersparnis

Für die Praxis bedeutet die mechanische Luftbewegung eine erhebliche Verkürzung der Betriebszeiten. Wichtige Instrumente sind schneller wieder verfügbar. Bei Geräten ohne Ventilator sind die Betriebszeiten z. T. 35% länger.

Qualität - made in Germany

**MELAG®**  
Evidence Based Sterilization

## Robust und langlebig

Der *Sterilisator 75* ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Das macht ihn robust und langlebig. Das bei Heißluft-Sterilisatoren mit lackiertem Gehäuse oft auftretende Einbrennen von chemischen Rückständen aus der Instrumenten-Aufbereitung ist dadurch nicht möglich. Auch der Innenraum ist aus Edelstahl. Damit setzt der *Sterilisator 75* einen internationalen Spitzenstandard.



## Großer Innenraum

Bei kompakten Aussen-Abmessungen kann der *Sterilisator 75* zwei Tablett (29 x 19 x 2cm) aufnehmen. Serienmäßig ist er mit der "Halterung 1" für bis zu 2 Tabletts ausgestattet. Werden die Instrumente wegen der kontaminationsgeschützten Aufbewahrung in einer geschlossenen Aluminium-Kassette (Art.-Nr. 00287) sterilisiert, wird die "Halterung 2" für eine Kassette (oder ein Tablett) benötigt. Die Halterungen können schnell ohne jegliches Werkzeug gewechselt werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, falls Sie statt der "Halterung 1" die "Halterung 2" wünschen.



"Halterung 1"  
mit 2 Tabletts




"Halterung 2"  
mit 1 Aluminium-Kassette



"Halterung 2"  
mit 1 Tablett

## Kurze Betriebszeiten

Der *Sterilisator 75* benötigt dank der mechanischen Luftbewegung nur noch 60 Minuten Gesamtbetriebszeit. Für verpackte Instrumente, z. B. in geschlossenen Aluminium-Kassetten, beträgt die Betriebszeit nur 75 Minuten. Die Temperatur im Innenraum kann durch das Thermometer jederzeit kontrolliert werden. Der präzise Temperaturregler arbeitet im Bereich von 60 - 180°C, mit einer Reglergenauigkeit von 2,5°C bei 180°C.

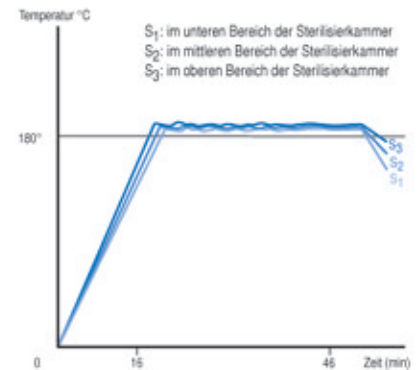

Temperaturkonstanz an jeder Stelle der Sterilisierkammer

## Bedienungsfreundlich

Wird der *Sterilisator 75* durch die eingebaute Schaltuhr eingeschaltet, so erfolgt vollautomatisch

der Ablauf des gesamten Sterilisationsvorgangs und die abschließende Stromabschaltung.

## Qualität und Präzision für höchste Hygieneansprüche

Vor mehr als 50 Jahren begann MELAG sich in Berlin auf die Herstellung von Sterilisatoren zu spezialisieren. Durch Qualitätsbewusstsein, Solidität und Innovationsfreudigkeit in Verbindung mit höchstem Sicherheitsstreben, gelang dem Familienunternehmen der Aufstieg zu einem führenden Hersteller.



Weltweit mehr als 345.000 MELAG-Geräte sind Beweis für diesen Erfolg. Jahrzehntelange Erfahrung, moderne computergesteuerte Produktionstechnik auf einer Fläche von mehr als 7.000 m<sup>2</sup> im Werk Berlin, die Verwendung hochwertiger Materialien und ein bewährter Mitarbeiterstamm machen MELAG-Geräte zu bedienungskomfortablen Qualitätsprodukten. Zur Firmenphilosophie gehört die konsequente Spezialisierung auf ein abgegrenztes Produktionsprogramm.

Dadurch ist es MELAG möglich, mit einem hochspezialisierten Entwicklungsteam die Produktpalette stets marktgerecht und auf international führendem technischen Niveau zu halten und weiterzuentwickeln. Das gesamte MELAG Team ist stolz, mit Geräten und Artikeln für die richtige Sterilisation und die sichere Steril-Lagerung einen entscheidenden Beitrag zum Schutz der Gesundheit von Praxisteam und Patienten zu leisten.

[www.melag.com](http://www.melag.com)

**MELAG®**

Vertrieb durch:  
[www.praximed.com](http://www.praximed.com)  
[info@praximed24.eu](mailto:info@praximed24.eu)  
Fax 037754-2393

**PraxiMed®**