

Safety-Venenverweilkanülen

Sicherheit geht vor. Sind Sie geschützt?



Infusionstechnik

Abrechenbarer Sprechstundenbedarf

Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter vor Nadelstichverletzungen und der damit verbundenen Infektionsgefahr.

- Vasofix® Safety
- Introcan® Safety

Erfüllen Sie die Anforderungen der
TRBA 250

Mehr als nur ein Nadelstich...


Stellen Sie sich vor, Sie verletzen sich an einer Nadel.

Sind Sie sicher, dass die Nadel nicht infiziert war?


**Die Risiken einer nadelstichbedingten Krankheitsübertragung
– bezogen auf eine kontaminierte Nadel – liegen bei:**

- Hepatitis B.....1 von 3 Vorkommnissen
- Hepatitis C.....1 von 30 Vorkommnissen
- HIV.....1 von 300 Vorkommnissen

Quelle: Preventing "Sharps" Injuries,
Eucomed Position Paper, Dec 2001

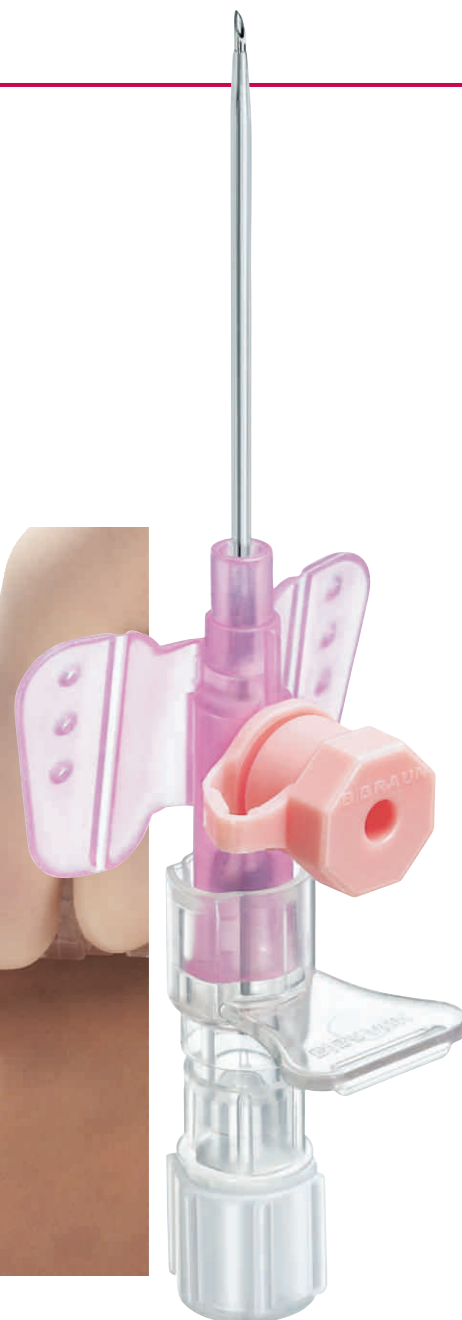

Vasofix[®]
Safety

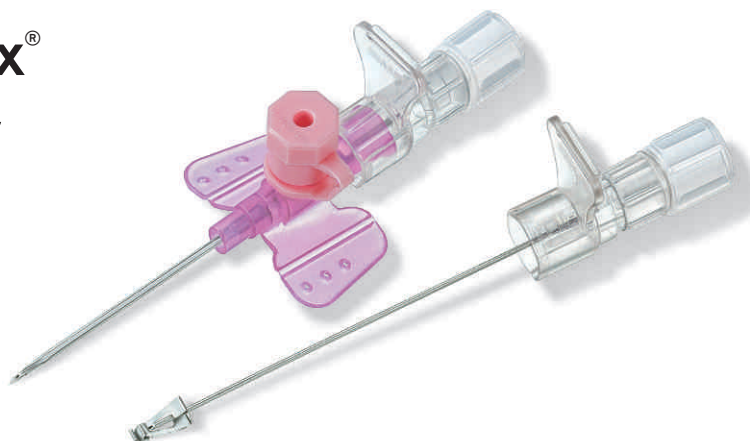

Das gemeinsame Safety-Sicherheitssystem

Infusionstechnik



Selbstaktivierende Clip-Technik

Der Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen

Der Clip verhindert weitere Nutzbarkeit

Der Safety-Mechanismus kann nicht umgangen werden

Keine Änderung Ihrer Anwendungsgewohnheiten




Selbstaktivierend

Die Safety-Venenverweilkanülen besitzen ein selbstaktivierendes Sicherheitssystem, welches die Nadel beim Zurückziehen automatisch und sicher umschließt.



Keine unbeabsichtigte Aktivierung

Der patentierte Safety-Clip schließt das Risiko einer unbeabsichtigten Aktivierung während der Handhabung vollständig aus.

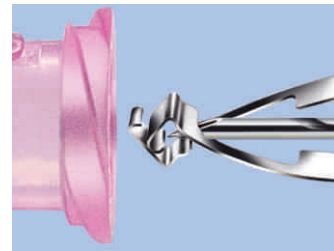

Sofortschutz

Der Safety-Clip schnappt sofort nach der Aktivierung des Sicherheitsmechanismus beim Austritt aus dem Katheter über die scharfgeschliffene Nadelspitze. Dadurch wird diese beim Herausziehen aus der Vene sicher umschlossen.

























Dauerhaft

Der patentierte Mechanismus fixiert den Safety-Clip dauerhaft auf der Nadelspitze. Somit werden Nadelstichverletzungen zuverlässig verhindert.

Introcan[®] Safety



Handelsformen

Größe ø mm	G	Innen- ø mm	Flow in ml/min.	Stichlänge mm	Farbcode	REF	PZN	REF	PZN
Vasofix® Safety								Mandrins	
0,7	24	0,51	22	19		*4269071 S-01	5132456	-	-
0,9	22	0,61	36	25		4268091 S-01	0198120	4215095	3173020
1,1	20	0,76	61	33		4268113 S-01	0198137	4219104	3207701
1,3	18	0,96	103	33		4268334 S-01	0198143	4219139	6176036
1,3	18	0,96	96	45		4268130 S-01	0198605	4219120	2758876
1,5	17	1,11	128	45		4268156 S-01	0198700	4215150	2758882
1,7	16	1,30	196	50		4268172 S-01	0198841	4219171	2758899
2,2	14	1,75	343	50		4268210 S-01	0199415	4219201	2758907
Introcan® Safety									
0,7	24	0,51	22	19		4252500-01	4095693	-	-
0,9	22	0,61	35	25		4252519-01	4095701	4214099	4424033
1,1	20	0,76	60	32		4252535-01	4095718	4214110	4424056
1,3	18	0,96	105	32		4252560-01	4095724	4214323	4424079
1,3	18	0,96	100	45		4252551-01	4095730	4214137	4424062
1,7	16	1,30	210	50		4252578-01	4095747	4214170	4424085
2,2	14	1,70	345	50		4252594-01	4095753	4214218	4424091
Introcan® Safety-W									
0,7	24	0,51	22	19		4254503-01	4095776	-	-
0,9	22	0,61	35	25		4254511-01	4095782	4214099	4424033
1,1	20	0,76	60	32		4254538-01	4095799	4214110	4424056
1,3	18	0,96	105	32		4254562-01	4095807	4214323	4424079
1,3	18	0,96	100	45		4254554-01	4095813	4214137	4424062
1,7	16	1,30	210	50		4254570-01	4095836	4214170	4424085
2,2	14	1,70	345	50		4254597-01	4095842	4214218	4424091

Material: FEP, Verkaufseinheit: 50 Stück
*Material: PUR



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Melsungen AG
OPM

Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen
Deutschland
Tel (0 56 61) 71-33 99
Fax (0 56 61) 71-35 50

www.bbraun.de