

Vasco® Vinyl Sensitive

Unsterile Untersuchungs- und Schutzhandschuhe | Datenblatt

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE



Die B. Braun Avitum AG bestätigt, dass die Vasco® Vinyl Sensitive Handschuhe folgenden Normen und Vorschriften entsprechen:

EG-Zertifikate und angewandte Normen

Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745

EN 455 1-4

Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung

EN 374/EN ISO 374, EN ISO 21420, EN 16523-1, ISO 16604

Qualitätszertifikate

ISO 13485, ISO 9001

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Informationen und Konformitätserklärung gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425:



www.bbraun.com/gloves-declarations-of-conformity



Anhui Intco Medical Products Co,ltd
No.6, Haitang South Road, Suixi Wuhu Modern Industrial Park, Suixi County
Huaibei City, Anhui Province, China




B. Braun Avitum AG
Schwarzenberger Weg 73-79
34212 Melsungen
Germany

Vasco® Vinyl Sensitive


Unsterile Untersuchungs- und Schutzhandschuhe | Regulatorische Informationen

Medizinprodukte-Information

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 (KLASSE I), EN 455

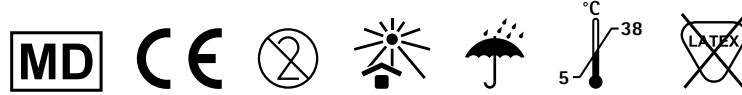

Lebensmittelkonformität

 Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß Verordnung (EG) EU 10/2011 und Verordnung (EU) 1935/2004 (Nicht für fettige Lebensmittel verwenden.)

PSA-Information

PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III)

Getestet gemäß:

ISO 374-1/Typ B



KPT

Kennbuchstabe	Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 Permeationsgrad	EN ISO 374-4:2013 Mittlere Zersetzung
K	Natriumhydroxid 40 %	Level 6	-51,4%
P	Wasserstoffperoxid 30 %	Level 2	19,6%
T	Formaldehyd 37 %	Level 6	-47,7%

Getestet gemäß EN 16523-1:2015

Leistungsstufen gemäß EN ISO 374-1:2016+A1:2018	1	2	3	4	5	6
Gemessene Durchbruchzeit (Min.)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

Die Degradation gibt die Veränderung der Durchstichfestigkeit der Handschuhe nach ständigem Kontakt der Außenfläche mit der Prüfchemikalie an.

AQL 1,5

Widerstand gegen Bakterien und Pilze Bestanden

Widerstand gegen Viren Bestanden

Referenz-Viruspenetration: ISO 16604

ISO 374-5:2016



VIRUS

Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien. Der Widerstand gegen Chemikalien und die Durchstoßfestigkeit wurden unter Laborbedingungen allein an aus dem Handflächenbereich entnommenen Mustern ermittelt und beziehen sich ausschließlich auf die getesteten Chemikalien. Die Ergebnisse können abweichen, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird. Wir empfehlen, die Handschuhe auf ihre Eignung für den beabsichtigten Verwendungszweck hin zu prüfen, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abrieb und Zersetzung von den Testbedingungen abweichen können. Wurden Schutzhandschuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften geringeren Schutz vor gefährliche Chemikalien bieten. Bewegung, Hängenbleiben, Reiben und Zersetzung durch chemische Kontakte etc. können die tatsächliche Verwendungszeit wesentlich verkürzen. Im Fall von korrosiven Substanzen kann die Zersetzung der wichtigste Faktor bei der Wahl eines chemischen Schutzhandschuhs darstellen. Untersuchen Sie die Handschuhe vor dem Einsatz auf Mängel und Defekte.

Vasco® Vinyl Sensitive

Unsterile Untersuchungs- und Schutzhandschuhe | Technische Daten



Größe	Art.-Nr. 100 Stück.	Maße der Handschuhe (EN ISO 455)	
		Breite der Handfläche	Gesamtlänge
S	6091520	85 ± 5 mm	≥ 240 mm
M	6091530	95 ± 5 mm	
L	6091540	105 ± 5 mm	
XL	6091550	115 ± 5 mm	

Physikalische Eigenschaften

		Mindestanforderung	Typischer Wert
Wanddicke	Finger	0,07 ± 0,02 mm	0,085 mm
	Handfläche	0,07 ± 0,02 mm	0,073 mm
	Stulpe	0,05 ± 0,02 mm	0,054 mm
Reißkraft	Während der Haltbarkeitsdauer	≥ 3.6 N	4 N nach Alterung

Handschuhdesign

Farbe	violett
Form	gerade Finger, beidhändig verwendbar
Stulpe	Rollrand
Oberfläche außen	glatt
Oberfläche innen	polymerbeschichtet, puderfrei

Handschuhmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)	
Latexallergierisiko	frei von Latexproteinen

Beschleuniger

DOTP (Dioctylterephthalat)	
Frei von DOP/DEHP (Dioctylphthalat/Diethylhexylphthalat)	

Zusatzstoffe

Viskositätsmodifikator, Ca-Zn-Stabilisator	
--	--

Logistik-Information

Spenderbox	100 Stück	240 x 125 x 60 mm (L x B x H)
Transportverpackung	10 Spenderboxen	
Haltbarkeit	5 Jahre	
Aufbewahrung	bei Zimmertemperatur lagern, vor Staub, Feuchtigkeit, Sonnenlicht und Ozon schützen	



Verpackung aus recyceltem Material